



LÍNEA DENTAL DENTAL LINE

Índice Index

Acrílicos

Subiton Resina acrílica de autocurado para bases y reparaciones	5
Subident Resina acrílica de autocurado para coronas y puentes	5
Crilene Resina acrílica de autocurado para carillas, coronas y puentes	5
Subiton Color Resina acrílica de autocurado para placas de ortodoncia	6
Cubaplat Resina acrílica de autocurado para cubetas individuales	6
Siltom Rosa Separador para Yeso y Acrílico	6
Siltom Marrón Separador para Yeso y Acrílico	6
Modificadores de color para acrílico - Vetas	6

Cementos

Prothoplast Policarboxilato Cemento de Policarboxilato de Cinc	7
Prothoplast Fosfato Fosfato de Cinc	7
IonomaX Acondicionador de Dentina	7
Zoer's Cemento de óxido de cinc-eugenol reforzado	8
Pickav Compuesto radioopaco de hidróxido de calcio	8
IonomaX Tipo I Ionómero vítreo para cementado de restauraciones rígidas y bandas de ortodoncia	8
IonomaX TIPO II Ionómero vítreo para restauración	9
IonomaX TIPO III Ionómero vítreo para relleno	9
IonomaX Lining Ionómero vítreo para recubrimientos y bases cavitarias	9

Materiales de impresión

Subilastic Silicona para impresiones dentales	10
Perfex Pasta Zinquenólica Pasta zinquenólica para impresiones	10
Perfex Yeso Yeso Blanco para impresiones	10
PinkGel Alginato para impresiones dentales	10
Godiva Perfectín - Lápices Perfectín Compuesto para modelar	11
Perfex Placa Base	11
Subigel Material para duplicación	11
Siltom Nº1 Pasta para pulido de metales y acrílico	11
Siltom Nº2 Pasta para pulido de metales y acrílico de alto brillo	11

Ceras

Perfectín	12
Perfex Flameador	12
Resil Rebase para dentaduras	12

Farmacopea

Perfex Eugenol - Perfex Óxido de Cinc - Perfex Iodoformo	13
--	----

Perfex Acero Inoxidable Premium

Algodonero - Fresero - Lámpara de Alcohol - Porta Tijeras - Estuche Jeringa Luer	14
Cajas Lisas - Cajas Miniendo - Cajas para Endodoncia - Cajas Perforadas	14
Bandeja Acanalada - Bandeja Lisa - Bandeja Perforada - Cubetas con tapa	15
Contenedor para Algodón y Gasa - Porta Vasos Dappen - Riñonera - Tambores para Esterilización	15

Acrylics

Subiton Self curing acrylic for bases and repairs	5
Subident Self Curing Acrylic for Crowns and Bridges	5
Crilene Self curing acrylic resin for facings, crowns and bridges	5
Subiton Color Self curing acrylic resin for orthodontic plates	6
Cubaplat Self curing acrylic resin for individual trays	6
Siltom Pink Separator for Acrylic and Plaster	6
Siltom Brown Separator for Acrylic and Plaster	6
Color modifiers for acrylics - Streaks	6

Cements

Prothoplast Policarboxilato Zinc Polycarboxylate Cement	7
Prothoplast Fosfato Zinc Phosphate	7
IonomaX Dentine Conditioner	7
Zoer's Reinforced eugenol-zinc oxide cement	8
Pickav Calcium hydroxide radio-opaque compound	8
IonomaX Tipo I Glass ionomer cement for cementing rigid restorations and orthodontic bands	8
IonomaX TIPO II Glass ionomer for restorations	9
IonomaX TIPO III Glass ionomer for fillings	9
IonomaX Lining Glass ionomer for linings and cavity bases	9

Impression materials

Subilastic Silicone for dental impressions	10
Perfex Zinc eugenol paste Zinc eugenol paste for impressions	10
Perfex Plaster White plaster for impressions	10
PinkGel Alginate for dental impressions	10
Godiva Perfectín - Perfectín Stick Modeling Compound	11
Perfex Base Plate	11
Subigel Duplication Material	11
Siltom Nº1 Polishing paste for metals and acrylics	11
Siltom Nº2 Polishing paste for high gloss polishing of metals and acrylics	11

Waxes

Perfectín Waxes	12
Perfex Jet Flammer	12
Resil Denture Rebase	12

Pharmacopoeia

Perfex Eugenol - Perfex Zinc Oxide - Perfex Iodoform	13
--	----

Perfex Premium Stainless Steel

Cotton Container - Bur Holder - Alcohol Lamp - Scissor Holder - Luer Syringe Box	14
Plain Boxes - Miniendo Boxes - Boxes for Endodontic Material - Slotted Boxes	14
Grooved Tray - Plain Tray - Slotted Tray - Trays with Lid	15
Gauze and Cotton Container - Dappen Dish Holder - Kidney Tray - Sterilization Drums	15

La Empresa The Company



Laboratorios SL fue fundada en 1950, como fábrica de productos odontológicos. En sus principios, produjo sólo materiales dentales bajo licencia suiza. Desde su inicio, la compañía tuvo un fuerte enfoque de innovación y crecimiento. Es así como unos 10 años después de su fundación, **Laboratorios SL** empezó a manufacturar productos para distintas especialidades, incluyendo la neurocirugía, traumatología y radiología.

La empresa entiende que su éxito está basado en una sólida y capacitada estructura de Recursos Humanos. Actualmente emplea a más de 120 personas de diversas especialidades; y cuenta con 4.000 metros cuadrados de producción y administración.

Laboratorios SL exporta más del 65% de su producción a 70 países, -incluyendo América, Europa, Norte de África, Medio Oriente y Lejano Oriente- y

cuenta con un sólido sistema de calidad que ha diferenciado a sus productos a lo largo del tiempo, consolidándolos como estándar de calidad.

La empresa cuenta con certificación ANMAT, BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), norma ISO 13485 y certificación CE (Europa).

Actualmente, **Laboratorios SL** se afirma como empresa líder en el mercado médico, posicionándose como competidor internacional de productos de especialidad.

Nuestra filosofía siempre continuará basándose en la innovación y desarrollo constante, capacitando las necesidades de nuestros clientes y transformándolas en productos de alta calidad y confiabilidad.

***Laboratorios SL** was founded in 1950, as a manufacturer of dental products. At first we only produced dental materials under a Swiss license. Since the very beginning, the company had a strong focus on innovation and growth. This is why about 10 years after being founded, **Laboratorios SL** began manufacturing products for different disciplines, including neurosurgery, orthopedics and radiology.*

*The Company bases its success on its solid Human Resources structure. Currently, **Laboratorios SL** employs more than 120 employees of diverse specialties; and counts with a total 4000 square meters of manufacturing and administration*

***Laboratorios SL** exports more than 65% of its production to over 70 countries, including America, Europe, North of Africa, Middle and Far East; and relies on a solid quality system which has differentiated its*

products from the competition, positioning them as a quality standard.

The Company is certified by ANMAT, GMP (Good Manufacturing Practices), ISO 13485 and CE (Europe).

***Laboratorios SL** has gained the status of market leader in the medical field, positioning itself as an international competitor of specialty products.*

Our philosophy will always be based in innovation and constant development, understanding our customer's needs and transforming them into high quality, reliable products.

Acrílicos Acrylics



TERMOCURABLE/HEAT-CURE

Prothoplast

Resina acrílica para base de dentaduras

Su superficie de alto brillo, excelente grado de translucidez y libre de poros dan un aspecto natural a las prótesis. Posee sobresalientes propiedades de resistencia mecánica, deflexión, estabilidad dimensional y buena adhesión a plásticos, metales y porcelana. Presenta excelente estabilidad en el color y duración en el medio bucal. Fácil manipulación. Polimeriza por elevación de la temperatura utilizando baño de agua.

Acrylic resin for denture bases

Due to the high gloss surfaces, excellent translucency, and lack of pores, it gives a natural appearance to the prostheses. It also provides an outstanding bending strength and mechanical resistance, and a good adhesion to plastics, metals and porcelain. It also has an excellent color stability and duration in the oral environment. Easy to manipulate. Polymerizes through temperature increase by means of a hot water bath.

Presentación / Presentation:

(P) 40g - 100g - 200g - 400g - 2Kg

(L) 20ml - 50ml - 100ml - 200ml - 500ml - 1L

Colores / Colors:

Cristal

Rosa (Pink)

V33 - V34



TERMOCURABLE/HEAT-CURE

ProthoQuick

Resina acrílica para base de dentaduras de curado rápido

Fácil manipulación y curado rápido en baño de agua caliente (20 min) o en microondas (6 min). Posee estabilidad térmica y dimensional superior. Aporta colores y aspecto natural a la prótesis.

Quick curing acrylic resin for denture bases

Easy to handle and fast curing in a hot water bath (20 min.) or in a microwave oven (6 min.). It provides a remarkable dimensional and thermal stability, and also a natural color and appearance to the prostheses.

Presentación / Presentation:

(P) 40g - 400g - 2Kg

(L) 20ml - 170ml - 1L

Colores / Colors:

Rosa (Pink) - Vet - Vet New



TERMOCURABLE/HEAT-CURE

Protho39

Resina acrílica para base de dentaduras de rápida gelificación

Rápida gelificación y largo tiempo de trabajo. Curado en baño de agua caliente.

Quick gelification acrylic resin for denture Bases

Quick gelification and long working period. Cures in a hot water bath.

Presentación / Presentation:

(P) 400g - 1Kg - 2Kg

(L) 200ml - 1L

Colores / Colors:

Cristal - Veteado (streaked)



TERMOCURABLE/HEAT-CURE

Proalon

Resina acrílica para coronas y puentes

Ofrece una mayor resistencia a la abrasión y al impacto masticatorio con colores naturales y estables. Terminación de alto brillo.

Acrylic resin for crowns and bridges

It has a higher resistance to abrasion and to masticatory impact. It comes in natural and stable colors and provides a high gloss finish.

Presentación / Presentation:

(P) 20g

(L) 40ml - 120ml

Colores / Colors:

59 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 81 - 2 incisal (según guía Biolón / according to Biolón guide)


AUTOCURABLE/SELF-CURE

Subiton

Resina acrílica de autocurado para bases y reparaciones

Resina acrílica de autocurado de endurecimiento rápido y buena resistencia compresiva para reparaciones y rebasados de prótesis, confección de prótesis inmediata, cubetas individuales, placas de ortodoncia y aparatos de ortopedia.

Self curing acrylic for bases and repairs

Self curing acrylic resin with a quick hardening and a good compression resistance for the repair and rebase of prostheses, for instant dentures, individual trays, orthodontic plates and orthopedic appliances.

Presentación / Presentation:

(P) 40g - 100g - 200g - 400g - 2Kg

(L) 20ml - 50ml - 100ml - 200ml - 500 ml - 1L

Colores / Colors:

Cristal - Rosa (Pink) - Vet - Vet New


AUTOCURABLE/SELF-CURE

Subident

Resina acrílica de autocurado para coronas y puentes

Resina acrílica de autocurado para coronas, puentes, frentes de coronas veener de máxima pureza y colores estabilizados de manera que no sean decolorados ni degradados en el medio bucal ni por acción de la luz.

Self Curing Acrylic for Crowns and Bridges

Self curing acrylic resin for crowns, bridges, crown facings, and veneers. This is a maximum purity resin with stabilized colors which will not be discolored or degraded either by the oral environment or by light.

Presentación / Presentation:

Avío profesional / Professional Kit:

6 polvos (powder) x 60g + 1 líquido (liquid) x 100ml)

(P) 20g - 100g

(L) 40ml

Colores / Colors:

59 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 81 - incisal (según guía Biolón / according to Biolón guide)


AUTOCURABLE/SELF-CURE

Crilene

Resina acrílica de autocurado para carillas, coronas y puentes

Resina acrílica de máxima pureza, granulometría ultrafina y de colores y efecto fluorescente naturales y estabilizados que no se decoloran en el medio bucal, ni por acción de la luz. Se les pueden incorporar matizadores para modificar el color básico.

Self curing acrylic resin for facings, crowns and bridges

Maximum purity acrylic resin of ultra fine granulometry and fluorescent effect, with natural, stabilized colors which will not be discolored either by the oral environment or by light. Color shades may be added to modify the basic color.

Presentación / Presentation:

Avío profesional / Professional Kit:

6 polvos (powder) x 60g + 1 líquido (liquid) x 100ml)

(P) 16g

(L) 10ml - 100ml

Colores / Colors:

59 - 62 - 65 - 66 - 67 68 - 69 - 77 - 81 incisal (según guía Biolón / according to Biolón guide)



Acrílicos Acrylics

AUTOCURABLE/SELF-CURE

Subiton Color

Resina acrílica de autocurado para placas de ortodoncia

Rápido endurecimiento, especialmente desarrollada para la confección de placas de ortodoncia. Posee sobresalientes propiedades de resistencia mecánica, resistencia a la flexión y estabilidad dimensional.

Self curing acrylic resin for orthodontic plates

Quick hardening, especially developed for the manufacturing of orthodontic plates.

It provides outstanding mechanical resistance, flexural strength, and dimensional stability.

Presentación / Presentation:

Kit Profesional / Professional Kit:

50g (verde - green)
50g (violeta - violet)
50g (rojo - red)
50g (azul - blue)
50g (amarillo - yellow)
100ml



AUTOCURABLE/SELF-CURE

Cubaplat

Resina acrílica de autocurado para cubetas individuales

Especialmente desarrollada para la confección de cubetas individuales para toma de impresiones con elastómeros y otros materiales.

Self curing acrylic resin for individual trays

Especially developed for the manufacturing of individual trays for impression taking with elastomers and other materials.

Presentación / Presentation:

(P) 100g - 500g - 1Kg - 2Kg
(L) 40ml - 200ml - 1L



Siltom Rosa

Separador para Yeso y Acrílico

Indicado para evitar que el acrílico quede adherido al modelo. A base de alginato.

Separator for Acrylic and Plaster

Indicated to prevent the acrylic resin from adhering to the model. Alginate based.

Presentación / Presentation:

250ml - 1L

Siltom Marrón

Separador para Yeso y Acrílico

Indicado para evitar que el acrílico quede adherido al modelo. A base de silicatos.

Separator for Acrylic and Plaster

Indicated to prevent the acrylic resin from adhering to the model. Silicate based.

Presentación / Presentation:

250ml - 1L



Modificador de color

Modificadores de color para acrílico

Concentrado de color para caracterizar resinas acrílicas de auto y termocurado, confeccionar placas de ortodoncia y aparatos de ortopedia de atractivos colores.

Color modifiers for acrylics

Color concentrate used to characterize self and heat curing acrylic resins, manufacturing of orthodontic plates and orthopedic appliances of attractive colors.

Presentación / Presentation: 20g

Colores / Colors:

Rojo LV (Red) - Violeta BU (Violet) - Amarillo (Yellow) - Marrón (Brown) - Gris (Gray) - Blanco (White) - Azul (Blue)



Vetas / Streaks

Vetas para caracterizar e imitar los tejidos blandos. Ideal para resinas acrílicas de auto y termocurado para bases dentaduras.

Streaks for the characterization and imitation of soft tissues. Suitable for self and heat curing acrylic resins for denture bases.

Presentación / Presentation: 20g



Cementos Cements



Prothoplast Policarboxilato

Cemento de Policarboxilato de Cinc

Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa.

Zinc Polycarboxilate Cement

Zinc polycarboxilate cement for the definitive cementing of incrustations, posts, crowns and bridges, for orthodontic bands and space preservers. It can also be used as cavity base, even in deep cavities, as it does not harm the pulp.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:
25g + 17 ml



Prothoplast Fosfato

Fosfato de Cinc

Cemento de fosfato de zinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, bandas de ortodoncia. Se lo puede utilizar también como base cavitaria o como material de obturación temporaria.

Zinc Phosphate

Zinc phosphate cement for the definitive cementing of incrustations, posts, crowns, bridges, and orthodontic bands. It is also used as a cavity base or as a temporary obturation material.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:
30g + 15 ml



IonomaX

Acondicionador de Dentina

El acondicionador dentinario es una solución suave de ácido poliacrílico, que se utiliza para remover la capa de barro dentinario y aumentar la adhesión del ionómero vítreo a la estructura dentaria.

Dentine Conditioner

The dentine conditioner is a solution of polyacrylic acid used to remove the dentine mud layer and increase the glass ionomer adhesion to the dental structure.

Presentación / Presentation:

(L) 10g



Cementos Cements

Zoer's

Cemento de óxido de cinc-eugenol reforzado

Cemento de óxido de cinc eugenol reforzado utilizado como restauración provisional y base protectora pulpar.


Reinforced eugenol-zinc oxide cement

Reinforced zinc oxide-eugenol cement used as temporary restoration and pulp protection base.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

40g + 15 ml

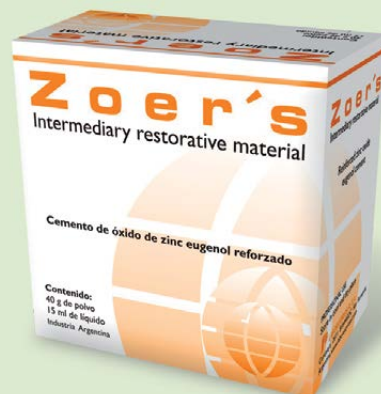

Pickav

Compuesto radioopaco de hidróxido de calcio

Cemento de hidróxido de calcio fraguable utilizado para la protección de la vitalidad pulpar indirecta bajo todo tipo de restauraciones. El hidróxido de calcio crea el medio apropiado para la formación del puente dentinario entre la restauración y la pulpa dental. Además inhibe el desarrollo bacteriano.

Calcium hydroxide radio-opaque compound

Calcium hydroxide cement used for the protection of indirect pulp vitality under all kinds of restorations. The calcium hydroxide generates the appropriate medium for the formation of the dentine bridge between the restoration and the dental pulp. In addition, it also inhibits bacterial development.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

13g pasta base (base paste) + 11g pasta catalizadora (catalyst paste)

Color / Color:

Marfil (Ivory)



IonomaX Tipo I

Cemento de ionómero vítreo para cementado de restauraciones rígidas y bandas de ortodoncia.

Cemento de ionómero vítreo con capacidad de adherirse químicamente a la estructura dentaria, biocompatible aún en preparaciones profundas, por el alto peso molecular de su ácido en la composición del líquido. La alta concentración de fluoruros en el polvo permite que estos sean liberados en el medio bucal, disminuyendo la incidencia de caries. La película obtenida es estable en el medio bucal por su baja solubilidad. Estas características, sumadas a las propiedades mecánicas lo convierten en el material de elección para la fijación de restauraciones rígidas y bandas de ortodoncia.

Glass ionomer cement for cementing rigid restorations and orthodontic bands

Glass ionomer cement capable of chemically adhering to the dental structure, it is bio-compatible, even in deep cavities, due to the high molecular weight of the acid component in the liquid. The high fluoride concentration in the powder permits its release in the oral environment, thus reducing cavity incidence. The film obtained is stable due to its low solubility. These characteristics, together with its mechanical properties make it the material of choice for the fixation of rigid restorations and orthodontic bands.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

14g + 10 ml + cuchara medidora (graduated spoon)



IonomaX TIPO II

Ionómero vítreo para restauración

Ionomax es un cemento de ionómero vítreo de alta resistencia y curado químico indicado para restaurar piezas dentarias temporarias, reconstrucción de muñones y restauraciones de clases III y V. Es un material de restauración radioopaco que se destaca por la alta solidez, adhesión química a la estructura dentaria, y la capacidad de liberar iones de fluoruros por largos períodos de tiempo. Este cemento es poco soluble en el medio bucal, lo que le permite tener estabilidad en el tiempo. Una vez mezclado, tiene una mayor viscosidad que los cementos normales, no es pegajoso y se puede condensar bien en la cavidad, sin perder su capacidad adhesiva.

Glass ionomer for restorations

Ionomax is a high resistance, chemically curing, glass ionomer cement indicated for the restoration of temporary dental pieces, stump reconstructions and Class III and V restorations. It is a radio-opaque material which stands out for its solidity, chemical adhesion to the dental structure, and its ability to release fluoride ions throughout long periods of time. This cement is little soluble in the oral environment, which provides stability through time. After mixing, its viscosity is higher than that of normal cements, it is not sticky and can be correctly placed into the cavity without losing its adhesion ability.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

10g + 10 ml + cuchara medidora (graduated spoon)



IonomaX TIPO III

Ionómero vítreo para relleno

Cemento de ionómero vítreo con capacidad de adherirse químicamente a la estructura dentaria, biocompatible aún en cavidades profundas, por el alto peso molecular de su ácido en la composición del líquido. La alta concentración de fluoruros en el polvo permite que estos sean liberados, disminuyendo la incidencia de caries secundarias por filtración marginal. Las propiedades mecánicas similares a las de la dentina, permiten que estos puedan ser utilizados como sustituto de la misma en cavidades profundas.

Glass ionomer for fillings

Glass ionomer cement capable of chemically adhering to the dental structure, it is bio-compatible, even in deep cavities, due to the high molecular weight of the acid component in the liquid. The high fluoride concentration in the powder permits its release in the oral environment, thus reducing the secondary cavity incidence due to marginal leakage. Its mechanical properties are similar to those of the dentine, which permits to substitute it in deep cavities.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

10g + 10 ml + cuchara medidora (graduated spoon)



IonomaX Lining

Ionómero vítreo para recubrimientos y bases cavitarias

Cemento de ionómero vítreo con capacidad de adherirse químicamente a la estructura dentaria, biocompatible aún en preparaciones profundas, por el alto peso molecular de su ácido en la composición del líquido. La alta concentración de fluoruros en el polvo permite que estos sean liberados en el medio bucal, disminuyendo la incidencia de caries. El producto final de la reacción es estable y tiene baja solubilidad. Estas características, sumadas a las propiedades mecánicas lo convierten en el material de elección para la ser utilizado como base cavitaria.

Glass ionomer for linings and cavity bases

Glass ionomer cement capable of chemically adhering to the dental structure, it is bio-compatible, even in deep cavities, due to the high molecular weight of the acid component in the liquid. The high fluoride concentration in the powder permits their release in the oral environment, thus reducing the cavity incidence. The reaction's final product is stable and shows a low solubility. These characteristics, together with its mechanical properties make it the material of choice for cavity bases.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

10g + 10 ml + cuchara medidora (graduated spoon)



Materiales de impresión Impression materials



Subilastic

Silicona para impresiones dentales
Disponible en tres consistencias:

Subilastic Pesada

Para pre-impresiones o base de impresiones.

Subilastic Regular / Subilastic Liviana

Para la reproducción precisa de detalles bucales. Indicado para impresiones de coronas y puentes, de inlays y onlays, implantes e impresiones funcionales.

Silicone for dental impressions

Available in three consistencies:

Subilastic Heavy

For pre-impressions and impression base.

Subilastic Regular / Subilastic Light

For the accurate reproduction of oral details. Indicated for crown and bridge impressions, for inlays, onlays, implants and functional impressions.

Presentación / Presentation:

Subilastic Pesada (Heavy) 500g
Subilastic Regular (Regular) 60g
60g Subilastic Liviana (Light) 60g
Subilastic Activador (Hardener) 30g



Perfex Pasta Zinquenólica

Pasta zinquenólica para impresiones

Material para la impresión definitiva para prótesis a placa con la que se logra excelente reproducción de detalles que al endurecer conserva todas sus propiedades de reproducción. Resistente en espesores delgados.

Zinc eugenol paste for impressions

Material for the definitive impression of plate prostheses, with an excellent detail reproduction, which is maintained after hardening. It is also resistant in small thicknesses.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

210g



Perfex Yeso

Yeso Blanco para impresiones

Yeso para impresiones dentales de agradable sabor y color con buena fidelidad de reproducción de detalles y buena estabilidad dimensional.

White plaster for impressions

Plaster for dental impressions. Pleasant taste and color, good detail reproduction fidelity and dimensional stability.

Presentación / Presentation: 500g

PinkGel

Alginato para impresiones dentales

Hidrocoloide irreversible con gran capacidad de reproducción de detalles y de transferencia al yeso.

Alginate for dental impressions

Irreversible hydrocolloid with an outstanding detail reproduction and transfer to plaster capacity.

Presentación / Presentation:

20g / 410g



Godiva Perfectín

Compuesto para modelar

Compuesto para modelar utilizado para impresiones primarias de bocas edéntulas y para impresiones de una sola preparación dentaria.

Modeling Compound

Modeling compound used for primary impressions of toothless mouths and for impressions of a single dental preparation.

Presentación / Presentation:

8 tabletas (tablets)

Color: Marrón (Brown)

Lápices Perfectín

Compuesto para modelar

Compuesto para modelar para re-marginales de cubetas individuales.

Modeling Compound

Modeling compound for trimming individual tray edges.

Presentación / Presentation:

12 lápices (Sticks)

Color: Marrón (Brown) – Verde (Green)



Perfex Placa Base

Futura base de prótesis sobre las que se confeccionan los rodets de mordida.

Future prosthesis base onto which the bite patterns are made.

Presentación / Presentation:

Rosa superior e inferior x 100 hojas
Pink upper and lower x 100 sheets

Rosa doble x 50 hojas
Pink double x 50 sheets



Subigel

Material para duplicación

Tipo I Normal: Gel reversible que toma estado fluido apto para su trabajo a 55º C. Transformándose al enfriarse un gel suave.

Tipo II Dura: Gel reversible que toma estado fluido apto para su trabajo a 65º C. Transformándose al enfriarse en un gel algo rígido.

Duplication Material

Type I Normal: Reversible gel which becomes fluid and suitable for work at 55º C, and returns to a soft gel state when cooling.

Type II Hard: Reversible gel which becomes fluid and suitable for work at 65º C, and returns to a somewhat solid gel state when cooling.

Presentación / Presentation: 1Kg



Siltom Nº1

Pasta para pulido de metales y acrílico

Pasta para pulido de metales, aleaciones de cromo- cobalto y acrílico.

Polishing paste for metals and acrylics

Polishing paste for metals, chrome-cobalt alloys and acrylics.

Siltom Nº2

Pasta para pulido de metales y acrílico de alto brillo

Pasta para pulido de metales, aleaciones de cromo- cobalto y acrílico para alto brillo.

Polishing paste for high gloss polishing of metals and acrylics

High Gloss polishing paste for metals, acrylics and chrome-cobalt alloys.

Presentación / Presentation: 200g



Ceras Waxes



Perfectín Ceras - Waxes

Ceras para mordida, encerados progresivos, de incrustaciones, para unir y estabilizar en forma temporaria componentes de puentes antes de soldar, para encajonado. Son uniformes mientras se encuentran blandas, de colores contrastantes con los materiales de los modelos, presentan estabilidad dimensional. Las que se utilizan para colado no dejan residuos sólidos después de fundidas. Se presentan en láminas: rosa (verano/ invierno), utility, amarilla, verde; en barritas (marfil, azul, verde, roja); en bloques para colados (verde y azul) y en tacos en diferentes medidas para tallar.

Bite waxes, for progressive waxing of incrustations, to temporarily join and stabilize bridge components before welding, and to empty impressions. Uniform while soft, contrasting colors with regard to model materials, they show dimensional stability. When used for casts, they do not leave solid residues after melting. They come in sheets: pink (summer/ winter), utility, yellow, green; in bars (ivory, blue, green, red); in blocks for casting (green and blue) and in wedges of different sizes for carving.



Perfex Flameador - Jet Flammer

Su recipiente de plástico hace de bomba, con una ligera presión del envase, genera el aire necesario para obtener una llama fina y limpia.

Ideal para ser utilizado con ceras y compuestos.

Its plastic container works as a pump which under a light pressure, blows enough air to produce a thin and clean flame.

Ideal for the manipulation of waxes and compounds.



Resil

Rebase para dentaduras

Material resiliente para rebasados permanentes de prótesis a placa de acrílico. Almohadilla para dentaduras lesivas, o de escaso reborde.

Denture Rebase


Resilient material for permanent rebase of acrylic plate prostheses. Denture cushion for damaged dentures, or those with too little edge.

Presentación / Presentation:

Avío / Kit:

25g Pasta base (base paste)
4 ml Endurecedor (hardener)
4 ml Adhesivo (primer)



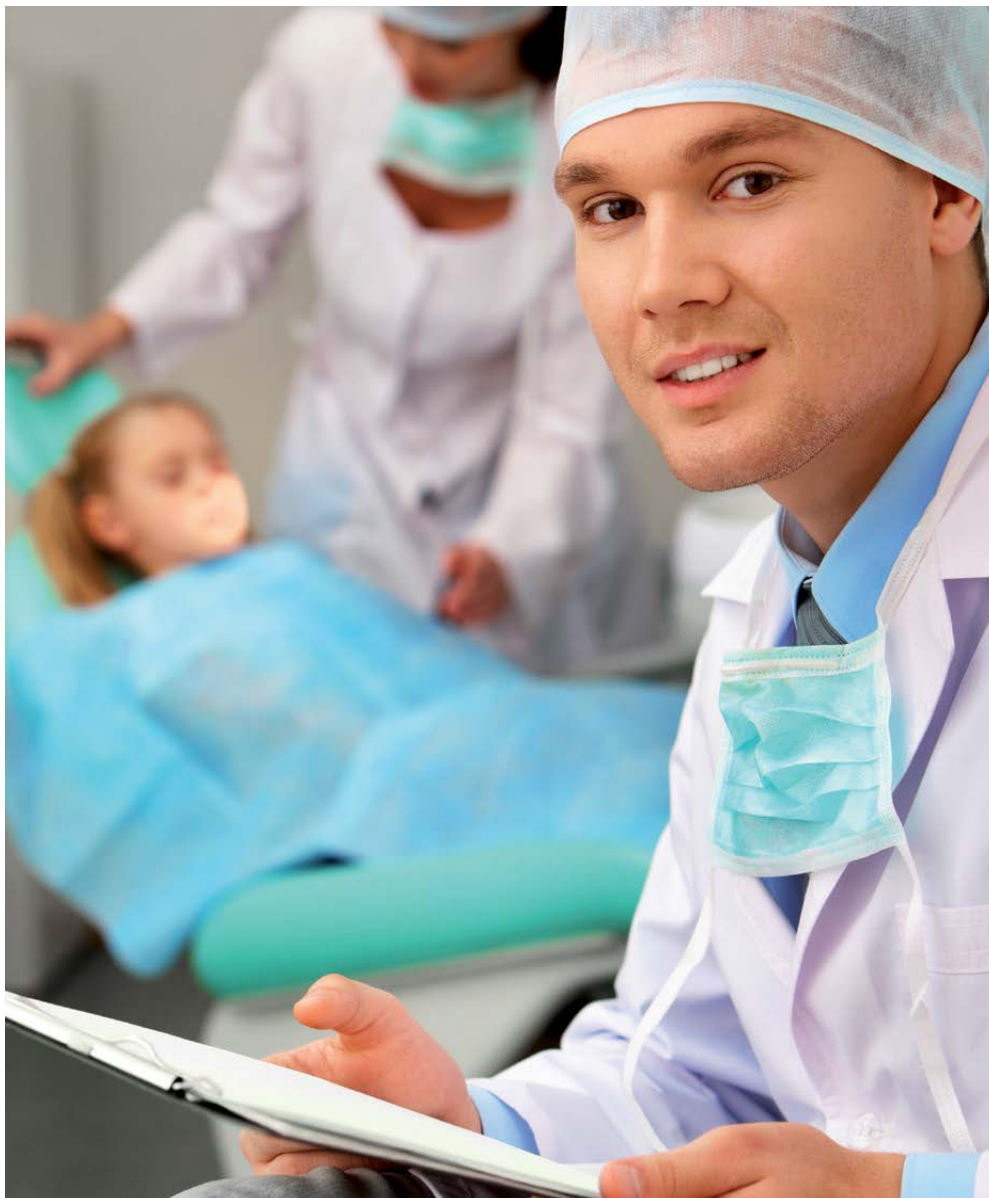

Perfex Eugenol

Solución componente de cementos, apósitos quirúrgicos, materiales de obturación temporal, obturadores de conductos radiculares, pastas para registro de mordida, materiales de rebase temporal para dentaduras y para materiales de impresión de bocas edéntulas.

Component solution of cements, temporary obturation materials, root canal obturators, bite registration pastes, surgical dressings, temporary rebase materials for dentures, and impression materials for toothless mouths.

Presentación / Presentation: 10ml - 20ml

Perfex Óxido de Zinc

El óxido de zinc es un componente fundamental de diversos materiales dentales junto con el **Eugenol** como medios cementantes, apósitos quirúrgicos, materiales de obturación temporal, obturadores de conductos radiculares, pastas registros de mordida, bases de rebase temporal para dentaduras y para materiales de impresión de bocas edéntulas.

*Together with **Eugenol**, zinc oxide is a fundamental component of various dental materials. In cements, surgical dressings, temporary obturation materials, root canal obturators, bite registration pastes, temporary rebase materials for dentures, and impression materials for toothless mouths.*

Presentación / Presentation: 100g

Perfex Iodoformo

Sustancia cristalina utilizada como antiséptico. Es radioopaco. Utilizado en endodoncia, para tratamientos pulpares en dientes temporarios, en cirugía.

Crystalline substance, used as an antiseptic material. It is radio-opaque, and is used in endodontics, pulp treatments in temporary teeth, and in surgery.

Presentación / Presentation: 10g

Perfex Acero Inoxidable Premium



Algodonero / Cotton Container

Algodoneros para limpio y sucio.
Cotton container, for clean and for used cottons.



Fresero / Bur Holder

Fresero con base de aluminio para 50 fresas CA y FG.
Bur holder with an aluminum base for 50 CA and FG burs.



Lámpara de Alcohol / Alcohol Lamp

Mechero fabricado en acero inoxidable Premium.
Alcohol lamp made in Premium stainless steel.



Porta Tijeras / Scissor Holder

Porta tijeras fabricado en acero inoxidable Premium.
Scissors holder, made in Premium stainless steel.



Estuche Jeringa Luer Luer Syringe Box

Cajas lisas con tapa.
Plain boxes with lid.

Cajas Lisas / Plain Boxes

Cajas para esterilización de instrumental quirúrgico. Aptas para esterilizar en estufa a seco y/o almacenar instrumental.
Boxes for the sterilization of surgical instruments. Suitable for dry heat sterilization and/or for storing instruments.



Cajas Miniendo / Miniendo Boxes

Cajas lisas y perforadas para endodoncia, con interior de aluminio o aluminio anodizado azul.
Plain and slotted boxes for endodontics, with aluminum or anodized aluminum inside lining.



Cajas para Endodoncia Boxes for Endodontic Material

Cajas para endodoncia con tapa interna y 18 divisiones.
Boxes for endodontics with internal lid and 18 divisions.



Cajas Perforadas / Slotted Boxes

Cajas perforadas para esterilización de instrumental quirúrgico. Las cajas se presentan perforadas, con y sin cierre. Aptas para esterilizar en autoclave.
Slotted boxes for the sterilization of surgical instruments. The boxes are supplied either with or without lock. Suitable for autoclave sterilization.



Perfex Premium Stainless Steel

Bandeja Acanalada / Grooved Tray

Bandejas acanaladas para instrumental.
Permiten una mejor organización de los instrumentos.

Grooved trays for instruments. They allow a better instrument organization.



Contenedor para Algodón y Gasa Gauze and Cotton Container

Recipientes lisos para algodón y gasa con tapa.
Plain containers for cotton and gauze with lid.



Bandeja Lisa Plain Tray


Bandejas para instrumental.
Plain trays for instruments.



Porta Vasos Dappen Dappen Dish Holder

Organizador especialmente diseñado para utilizar con vasos Dappen y de precipitación.

Organizer especially designed for Dappen and precipitation dishes.

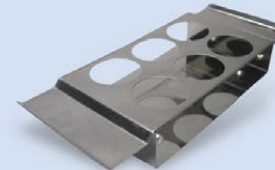

Bandeja Perforada / Slotted Tray

Bandejas perforadas para instrumental.
Permiten ser esterilizadas dentro de las cajas de autoclave.

Slotted trays for instruments, suitable for sterilization inside autoclave boxes.



Riñonera / Kidney Tray

Riñoneras fabricadas en acero inoxidable de excelente calidad.

Kidney trays made in excellent quality stainless steel.



Cubetas con tapa Trays with Lid


Cubetas con tapa y manija.
Trays with lid and handles.



Tambores para Esterilización Sterilization Drums

Tambores para esterilización con tapa con traba de cierre, aptos para autoclave y/o estufa a seco.

Sterilization drums with lid and lock, suitable for autoclave and/or dry stove.

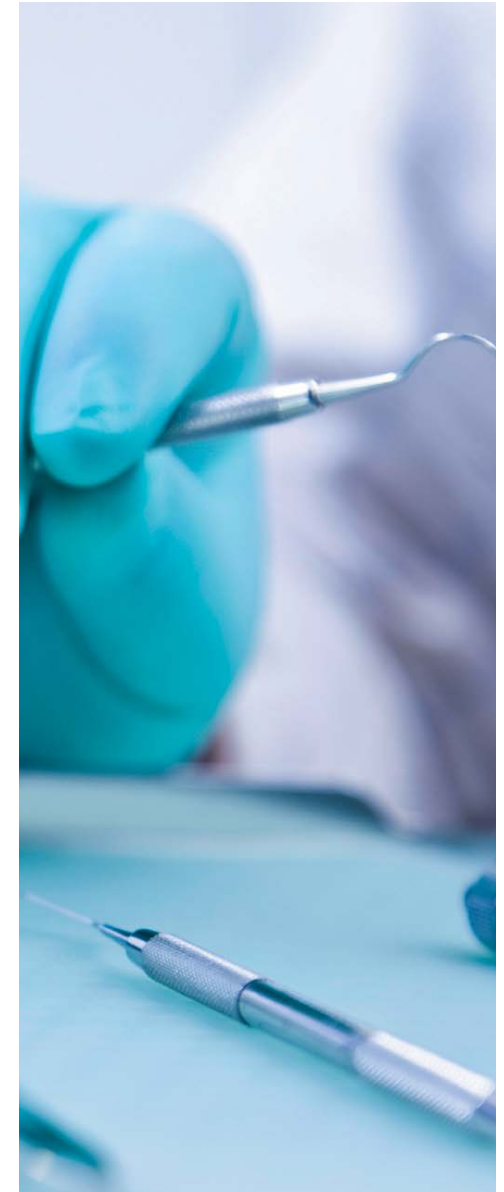

Desde 1950 al servicio
de la Odontología Mundial.

Serving the Dentist Industry
since 1950.



LABORATORIOS SL S.A.

Curupaytí 2611 (B1644GDC) | San Fernando | Buenos Aires | Argentina | Tel.: (+54 11) 4746 7100 | Fax: (+54 11) 4746 7722 | www.subiton.com