

Subiton

CLAVOS ENDOMEDULARES CON ANTIBIÓTICO



Diseñados para proporcionar
estabilidad en fracturas
infectadas de fémur o tibia



LABORATORIOS SL S.A.

Subiton NAIL

CLAVOS ENDOMEDULARES

Sistema de clavos endomedulares recubiertos con cemento quirúrgico con antibiótico


Diseñados para proporcionar estabilidad en fracturas infectadas de fémur o tibia. Su recubrimiento con cemento quirúrgico de PMMA con antibiótico permite una liberación local del mismo, contribuyendo de manera auxiliar al tratamiento de la infección.

Se mantienen implantados hasta la resolución del proceso infeccioso, según criterio del cirujano, y no deben permanecer in situ más de 6 meses.^{1,2}

Están indicados para el tratamiento de:

- ✓ Fracturas diafisarias infectadas de fémur o tibia
- ✓ Pseudoartrosis infectadas
- ✓ Osteomielitis diafisaria

Disponibles con gentamicina o tobramicina en una amplia gama de diámetros y longitudes.

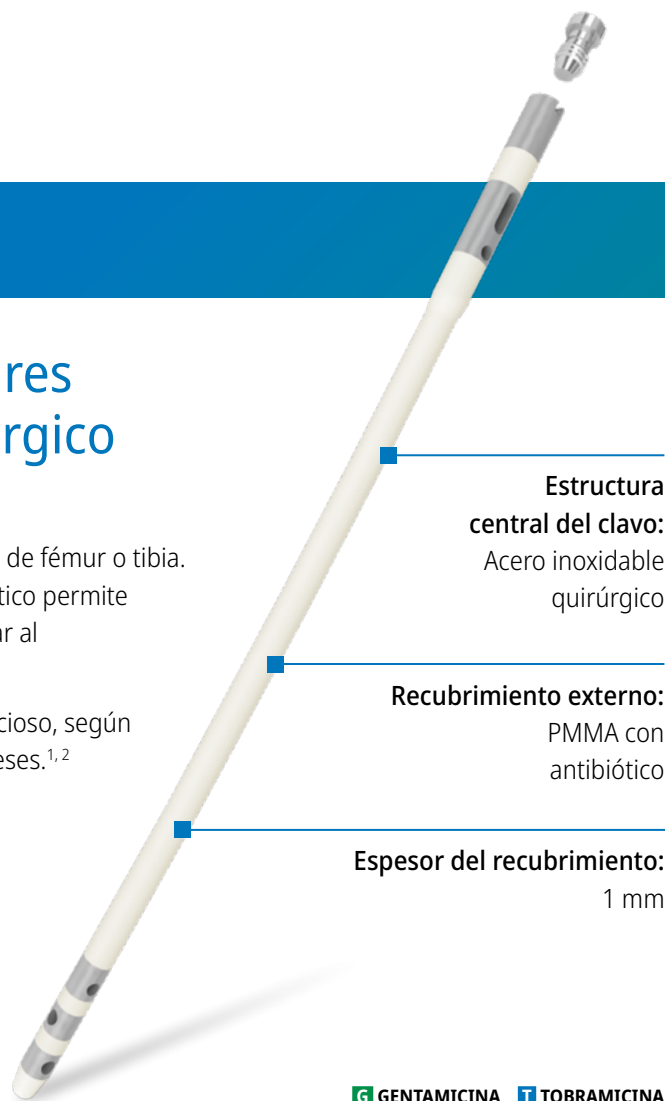

Estructura central del clavo:
Acero inoxidable quirúrgico

Recubrimiento externo:
PMMA con antibiótico

Espesor del recubrimiento:
1 mm

G GENTAMICINA **T** TOBRAMICINA

CLAVOS TIBIALES

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 9 x 250	882311	882575
Ø 9 x 280	882313	882577
Ø 9 x 310	882315	882579
Ø 9 x 340	882317	882581
Ø 9 x 370	882319	882583

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 10 x 250	882322	882586
Ø 10 x 280	882324	882588
Ø 10 x 310	882326	882590
Ø 10 x 340	882328	882592
Ø 10 x 370	882330	882594

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 11 x 250	882333	882597
Ø 11 x 280	882335	882599
Ø 11 x 310	882337	882601
Ø 11 x 340	882339	882603
Ø 11 x 370	882341	882605

CLAVOS FEMORALES

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 10 x 320	881402	882831
Ø 10 x 340	881403	882832
Ø 10 x 360	881404	882833
Ø 10 x 380	881405	882834
Ø 10 x 400	881406	882835

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 12 x 320	881420	882844
Ø 12 x 340	881421	882845
Ø 12 x 360	881422	882846
Ø 12 x 380	881423	882847
Ø 12 x 400	881424	882848

MEDIDA	REF G	REF T
Ø 14 x 360	881440	882859
Ø 14 x 380	881441	882860
Ø 14 x 400	881442	882861

Otras medidas se encuentran disponibles, sujetas a cantidades mínimas de pedido. **Consulte con su representante de ventas para obtener más información.**

Subiton NAIL INSTRUMENTAL DUAL H

INSTRUMENTAL PARA CLAVOS ENDOMEDULARES

Sistema instrumental para la colocación y extracción del clavo

El set Subiton Nail Instrumental DUAL H está diseñado para ser utilizado exclusivamente en la colocación y remoción de los clavos endomedulares femorales y tibiales con antibiótico Subiton Nail.³

- ✓ Los instrumentos incluidos en este set son reutilizables.

Incluye bandeja perforada con soportes para cada pieza y caja contenedora para esterilización.




REF 882097

SET INSTRUMENTAL

CONTENIDO

- 01 Cuerpo de guía
- 02 Tornillo de acople femoral
- 03 Acople femoral
- 04 Tuerca para acople
- 38 Tornillo tibial XL
- 37 Acople tibial XL
- 11 Medidor profundidad cerrojos
- 12 Destornillador punta doble
- 13 Pesa martillo deslizante
- 14 Barra martillo deslizante
- 15 Manija martillo deslizante
- 16 Iniciador de punta triangular
- 19 Manija de guía

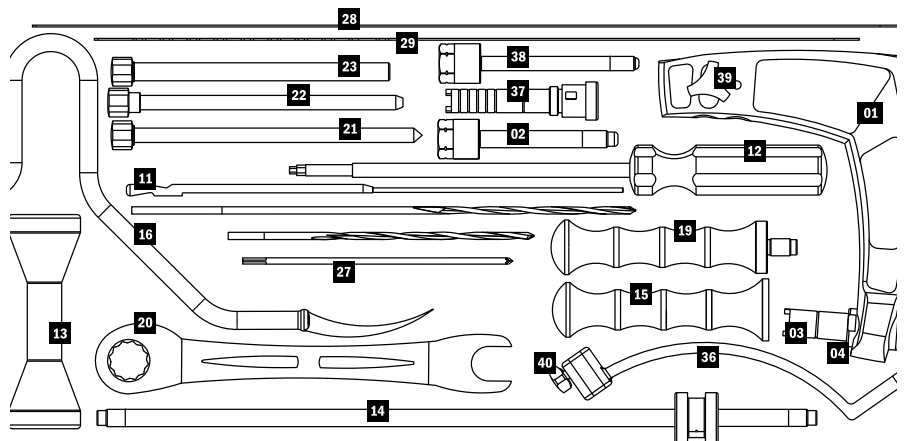

- 20 Llave de boca combinada #19
- 21 Punzón para partes blandas
- 22 Guías para mechas
- 23 Camisas para cerrojos
- 27 Steinman Ø 3.5mm
- 28 Regla radiopaca clavo femoral
- 29 Regla radiopaca clavo tibial
- 36 Halo
- 39 Perilla cuerpo de guía - halo
- 40 Perilla para camisa - halo

Subiton

mas información sobre nuestros
productos en **subiton.com**

Subiton es parte del grupo Biocomposites

En Biocomposites, nos enorgullece impulsar mejores resultados en una amplia gama de aplicaciones clínicas, beneficiando tanto a pacientes como a cirujanos. Con la incorporación de Subiton al grupo Biocomposites, potenciamos nuestra cartera de productos pioneros para el manejo de infecciones en huesos y tejidos blandos. Con sede en Keele, Reino Unido, y presencia global en Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, China, India y Australia, nuestros productos se utilizan en más de 1 millón de procedimientos al año y se comercializan en más de 100 países alrededor del mundo.

Referencias: **1.** Subiton Nail Clavo Endomedular con Antibiótico, Instrucciones de Uso. **2.** Subiton Nail Clavo Endomedular con Tobramicina, Instrucciones de uso. **3.** Subiton Nail Instrumental DUAL H, Instrucciones de Uso.

©2026 Todos los derechos reservados. No se permiten la copia, la reproducción, la distribución ni la reedición sin autorización, salvo que el titular, Laboratorios SL S.A., otorgue el permiso por escrito.

Los productos, configuraciones y variantes presentados en este folleto pueden no estar disponibles en todos los países o regiones. La disponibilidad está sujeta a las aprobaciones regulatorias locales y a las políticas comerciales vigentes. La información sobre la disponibilidad específica de los productos podrá ser confirmada a través de los canales comerciales y representantes autorizados, de acuerdo con la región correspondiente. Patentes concedidas: EP 2 594 297 B1, US 9,770,273 B2.