

Subiton

HASTES INTRAMEDULARES COM ANTIBIÓTICO



Desenhadas para proporcionar
estabilidade em fraturas
infectadas de fêmur ou tíbia

 LABORATORIOS SL S.A.

Subiton NAIL

HASTES INTRAMEDULARES

Sistema de hastes intramedulares revestidas com cimento cirúrgico com antibiótico


Desenhadas para proporcionar estabilidade em fraturas infectadas de fêmur ou tíbia. Revestidas com camada de cimento cirúrgico de PMMA com antibiótico permitem uma liberação local, contribuindo de maneira auxiliar ao tratamento da infecção.

Devem ficar implantadas até a resolução do processo infeccioso, segundo o critério do cirurgião, e não devem permanecer in situ mais de 6 meses.^{1,2}

São indicadas para o tratamento de:

- ✓ Fraturas diafisárias infectadas de fêmur ou tíbia
- ✓ Pseudoartroses infectadas
- ✓ Osteomielite diafisária

Disponíveis com gentamicina ou tobramicina com ampla oferta de diâmetros e longitudes.

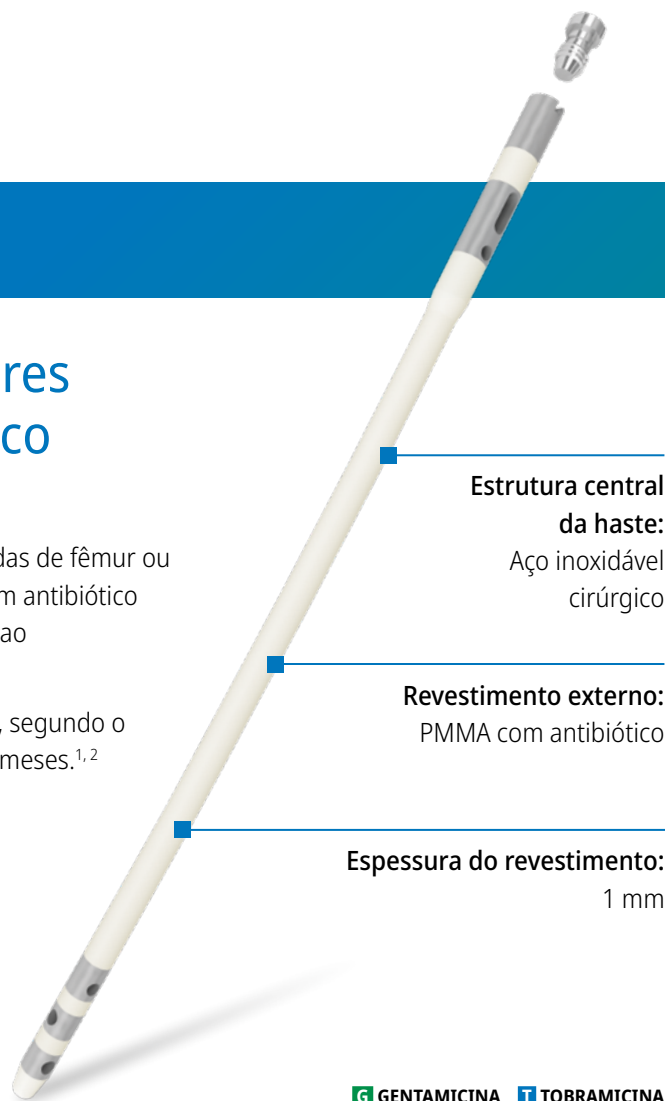

G GENTAMICINA **T** TOBRAMICINA

HASTES TIBIAIS

MEDIDA	REF G	REF T	MEDIDA	REF G	REF T	MEDIDA	REF G	REF T
Ø 9 x 250	882311	882575	Ø 10 x 250	882322	882586	Ø 11 x 250	882333	882597
Ø 9 x 280	882313	882577	Ø 10 x 280	882324	882588	Ø 11 x 280	882335	882599
Ø 9 x 310	882315	882579	Ø 10 x 310	882326	882590	Ø 11 x 310	882337	882601
Ø 9 x 340	882317	882581	Ø 10 x 340	882328	882592	Ø 11 x 340	882339	882603
Ø 9 x 370	882319	882583	Ø 10 x 370	882330	882594	Ø 11 x 370	882341	882605

HASTES FEMORAIS

MEDIDA	REF G	REF T	MEDIDA	REF G	REF T	MEDIDA	REF G	REF T
Ø 10 x 320	881402	882831	Ø 12 x 320	881420	882844	Ø 14 x 360	881440	882859
Ø 10 x 340	881403	882832	Ø 12 x 340	881421	882845	Ø 14 x 380	881441	882860
Ø 10 x 360	881404	882833	Ø 12 x 360	881422	882846	Ø 14 x 400	881442	882861
Ø 10 x 380	881405	882834	Ø 12 x 380	881423	882847			
Ø 10 x 400	881406	882835	Ø 12 x 400	881424	882848			

Há outras medidas disponíveis, sujeitas a quantidades mínimas de pedido. **Consulte seu representante de vendas para obter mais informação.**

Subiton NAIL INSTRUMENTAL DUAL H


INSTRUMENTAL PARA HASTES INTRAMEDULARES

Sistema instrumental para a colocação e remoção da haste

O conjunto Subiton Nail Instrumental DUAL H está desenhado para ser utilizado exclusivamente na colocação e remoção das hastes intramedulares femorais e tibiais com antibiótico Subiton Nail.³

- ✓ Os instrumentos incluídos neste conjunto são reutilizáveis.

Inclui bandeja perfurada com suportes para cada peça e caixa contêiner para esterilização.

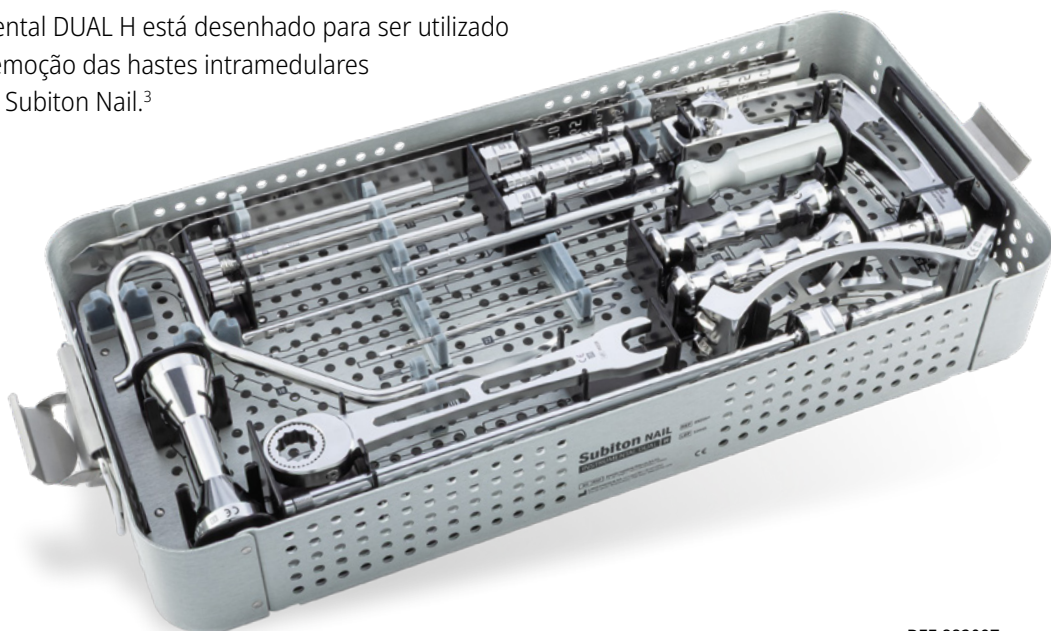

REF 882097

CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS

CONTEÚDO

01 Corpo-guia

02 Parafuso de acoplamento femoral

03 Acoplamento femoral

04 Porca de acoplamento

38 Parafuso tibial XL

37 Acoplamento tibial XL

11 Medidor de profundidade do bloqueio

12 Chave de fenda de cabeça dupla


13 Peso do martelo deslizante

14 Barra do martelo deslizante

15 Manopla do martelo deslizante

16 Iniciador de ponta triangular

19 Manopla fio-guia

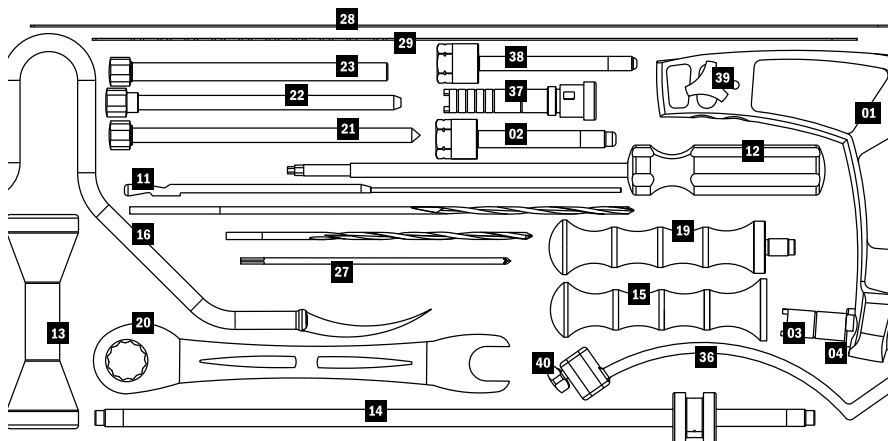

20 Chave combinada #19

21 Iniciador para partes moles

22 Fio-guia para pontas de broca

23 Camisas para parafusos

27 Fio Steinman 3.5 mm Ø

28 Régua para hastes femorais radiopacos

29 Régua para hastes tibiais radiopacos

36 Halo

39 Corpo-guia - Manopla do halo

40 Manopla de acoplamento do halo

Subiton

Mais informações sobre nossos produtos acesse **subiton.com**

Subiton faz parte do grupo Biocomposites

Na Biocomposites, temos orgulho de estimular melhores resultados em uma ampla gama de aplicações clínicas, beneficiando tanto pacientes quanto cirurgiões. Com a incorporação da Subiton ao grupo Biocomposites, potencializamos nosso portfólio de produtos pioneiros para o manejo de infecções em ossos e tecidos moles. Com sede em Keele, Reino Unido, e presença global na Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá e China, Índia e Austrália, nossos produtos são usados em mais de 1 milhão de procedimentos por ano e são comercializados em mais de 100 países ao redor do mundo.

Referências: 1. Subiton Nail Haste Intramedular com Antibiótico, Instruções de Uso. 2. Subiton Nail Haste Intramedular com Tobramicina, Instruções de uso. 3. Subiton Nail Instrumental DUAL H, Instruções de Uso.

©2026 Todos os direitos reservados. Cópia, reprodução, distribuição ou reedição sem autorização não é permitida, a menos que o titular, Laboratorios SL S.A., conceda permissão por escrito.

Os produtos, configurações e variações apresentados neste folheto podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. A disponibilidade está sujeita às aprovações regulatórias locais e às políticas comerciais em vigor. Informações sobre a disponibilidade específica dos produtos podem ser confirmadas por canais comerciais e representantes autorizados, de acordo com a região correspondente.

Patentes concedidas: EP 2 594 297 B1, US 9,770,273 B2.

REF 970680 / DOC-MAR-002 V1 (PT)

Laboratorios SL S.A., Curupaytí 2611 (B1644GDC), San Fernando, Buenos Aires, Argentina.



LABORATORIOS SL S.A.